



YENİ JENERASYON
ALTIN İĞNE TEKNOLOJİSİ



dcpharma
medical aesthetics cosmetics



YENİ JENERASYON ALTIN İĞNE TEKNOLOJİSİ

XLS Altın İğne Teknolojisi


Radyofrekans enerjisi, sağlık ve güzellik alanında uzun yıllardır kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte radyofrekans uygulamasına iki yeni özelliğin eklenmesi yöntemi çok daha etkili hale getirmiştir.

İlki radyofrekans yönteminin fraksiyonel hale getirilmesidir. Bu teknikte uygulanacak güç bir bütün halinde değil, yan yana birçok küçük noktadan cilde uygulanmaktadır. Bu sayede arada kalan sağlam dokular sayesinde hasarın çok daha az olması sağlanmaktadır.


İkinci yenilik ise mikro iğneler ile enerjinin doğrudan cilt içine verilmesidir. Radyofrekans cihazının başlığında bulunan 10-25-64 adet mikro altın iğne, atış yapıldığında vakum özelliği sayesinde de kısa sürelerle cilde penetasyonu optimum olur. Kullanılan iğnelerin uzunlukları 0.5 ile 3.5 mm arasında değiştirilebilmektedir. Burada kullanılan iğneler altından yapıldığı için bu yöntem "altın iğne" olarak da anılmaktadır. Altının iletken yapısı kullanılarak radyofrekans enerjisi direkt derinin alt tabakası olan dermise verilir. Bu sayede deri yüzeyinde gereksiz bir enerji kaybı olmadığı gibi ısıya bağlı deride oluşabilecek yan etkiler de ortadan kaldırılmış olur.

Uygulamalar

- ✓ Renk Açma
- ✓ Cilt Rejuvenasyonu
- ✓ Gözenek Sıkılaştırma
- ✓ Akne İzleri
- ✓ Kırışıklık Tedavisi
- ✓ Çatlak Tedavisi
- ✓ Hiperhidrozis (Koltuk Altı Terleme) Tedavisi
- ✓ Cilt Sıkılaştırma

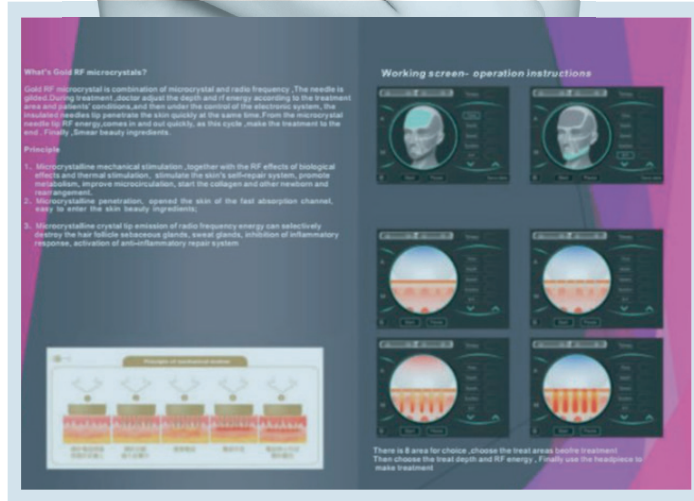

Radyofrekans altın iğne tedavisi, cildi sıkılaştıran, kırışıklıkların görünümünü azaltan ve cildinizin dokusunu iyileştiren yenilikçi bir kozmetik tedavidir. Bu yöntemle altın iğnelerin cilt altına ilettiği radyofrekans dalgaları, hücre içindeki suda yer alan iyonları harekete geçirek ısı oluşturur. Cilt yüzeyinizde herhangi bir zarar oluşturmadan kolajen ve elastin üretimi uyarılır, doğal bir iyileşme süreci başlatılır. Böylece cilt kendini yenileyerek onarır.

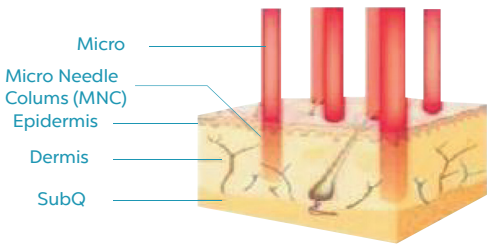

Nokta Atış

Mikrokristal Altın İğne

Altın İğne Radyo Frekans Hangi Amaçla Kullanılır ?

- ✓ Cilt Gençleştirmek ve Kırışıklık Tedavisi
- ✓ Boyun ve Dekolte Bölgesini Toparlama
- ✓ İz Tedavisinde
- ✓ Siville İzi Tedavisinde
- ✓ Vücut Çatlakları Tedavisinde
- ✓ Kol ve Bacaklardaki Sarkmaların Tedavisinde
- ✓ Gözenek Sıkılaştırma
- ✓ Aktif Akne Tedavisi
- ✓ Hiper Hidrozis Aşırı Terleme Tedavisi

Aksesuarları

- 3 Adet Başlık
- 10, 25, 64 Adet Mikro İğne
- Hafif ve Ergonomik Başlık
- Dokunmatik Ekran
- Otomatik Ekran
- Level 1-1 / 0,5 - 3,5 mm
- Derinliğine Ayarlanabilme Özelliği



XLS Altın İğne Başlıkları



10P

25P

64P



1. Treatment head touch skin

2. Micro Needle insert into skin automatically

3. Release of the Micro Needle


4. Micro Needle exit from skin automatically

5. Micro holes on skin opened for short time.

6. Rubbing the face care liquid

XLS Altın İğnenin Diğerlerinden Farkı Nedir?

- ✓ Başlığının Vakum Özelliğinin Olması.
- ✓ 2 ayrı fraksiyonel RF teknolojisini içermektedir
- ✓ Uygulamaya göre tedavi derinliğini (0-3.5 mm arasında) ayarlayabilme olanağı bulunmaktadır
- ✓ Özel iğneleme yöntemi sayesinde daha az ağrı ve noktasal kanama oluşur
- ✓ İsteğe göre 10-25-64 mikro iğne içermesi
- ✓ Ayarlanabilir milisaniye özelliği(10msn-1sn) 50 watt yüksek güç ile oldukça yüksek bir etkinliğe sahiptir

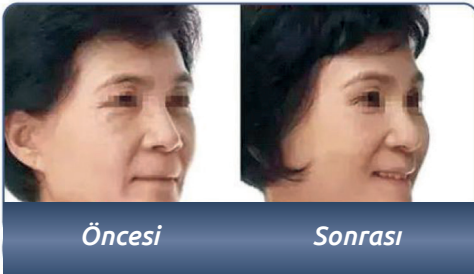


Öncesi

Sonrası




Öncesi

Sonrası

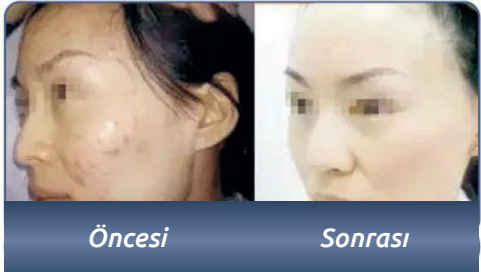

Öncesi

Sonrası

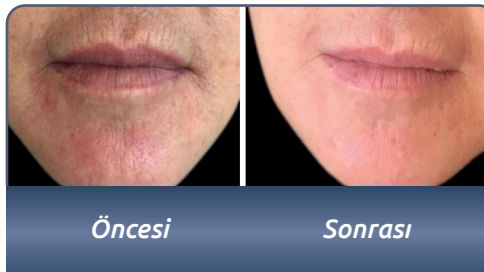

Öncesi

Sonrası



UYGULAMA ALANLARI

- Cilt Kırışıklıklarının Giderilmesi
- Cilt Yenilenmesi ve Cilt Kalitesinin Arttırılması
- Yüz, Boyun ve Dekolte Bölgesi Sarkmaları
- Yara izi (Skar Tedavisi)
- Siville İzleri Tedavisi (Akne Tedavisi)
- Leke Tedavisi
- Vücut Çatlakları Tedavisi
- Kol ve Bacaklardaki sarkmaların tedavisi
- Gözeneklerin Sıkılaştırılması

✓ Hemen Görülen Muhteşem Sonuçlar ✓ Ağrı Yok Acı Yok ✓ İyileşme Süreci Yok



Ascendis
HEALTH

nimue
SKIN TECHNOLOG

CLINICARE®

NEWUP BIOSLIMMING™

DAOL MGD
MEDICAL LASER

Lucent Laser
SkinPen
by Drilus Medical



dcpharma
medical aesthetics cosmetics

Dermoklinika Sağlık Kozmetik Elektronik
Eğitim Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

A. Bahçeşehir 2.Kısım Mah. 12. Cad. Saygı Yapı Koop. 12U
Başakşehir - İstanbul

T. +90 212 509 40 50 F. +90 212 509 40 50

dcpharma.com.tr  dc.pharma